

SCHEDA TECNICA DISPOSITIVO

GUAINA PER INCONTINENZA URINARIA MASCHILE

REF	MISURA	CND	GMDN	RDM
FOR.007.025	∅ 25 mm	U070201	34929	884234
FOR.007.030	∅ 30 mm			884235
FOR.007.035	∅ 35 mm			884236

IMMAGINE



DESCRIZIONE GENERALE

La guaina per incontinenza urinaria è utilizzata per la raccolta dell'urina nei pazienti maschili affetti da incontinenza. Si collega facilmente e in modo sicuro a qualsiasi sacca di raccolta urina da gamba o da letto.

La guaina, realizzata in lattice naturale, è stata progettata per adattarsi alle diverse dimensioni del pene, mantenendo per tutta la sua lunghezza, elasticità e morbidezza.

La calotta zigrinata è stata progettata per eliminare la possibilità che il sistema di drenaggio si attorcigli su se stesso, con conseguente blocco del flusso di urina e perdita o "ballooning" (rigonfiamento) della guaina.

ISTRUZIONI D'USO

Applicazione della guaina:

1. Lavare le mani con acqua e sapone.
2. Pulire ed asciugare il pene e rasare il pelo pubico in eccesso; non usare talco o creme.
3. Rimuovere da un solo lato la pellicola protettiva della banda biadesiva.
4. Applicare la banda a spirale attorno al pene e rimuovere la seconda pellicola.
5. Posizionare la guaina sul pene avendo cura di lasciare uno spazio tra il glande e il tubicino della guaina per favorire il deflusso dell'urina.
6. Srotolare la guaina sopra la banda biadesiva ed esercitare una lieve pressione per farla aderire bene.
7. Collegare la guaina alla sacca urinaria.

Rimozione la guaina:

1. Scollegare la guaina dalla sacca dell'urina.
2. Riavvolgere la guaina per tutta la lunghezza del pene.

Raccomandazioni:

1. Cambiare la guaina ogni 12-24 ore.
2. Non applicare strisce adesive in modo troppo stretto per evitare il blocco della circolazione.

CONTROINDICAZIONI

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità al lattice.
Non mettere a contatto con oggetti taglienti, appuntiti o abrasivi. Non riutilizzare.

MATERIALI

Lattice di gomma naturale di grado medicale prevulcanizzato, saturo di ammoniaca, con un alto grado di purezza e bassa tossicità che lo rende un lattice ideale per la produzione di articoli medicali.

SPECIFICHE TECNICHE


Misura	Diametro	Lunghezza guaina
25	M	Ø 25±2 mm
30	L	Ø 30±2 mm
35	XL	Ø 35±2 mm

Anti Kinking: la calotta zigrinata, a differenza di altre guaine, ha una resistenza tale da resistere al kinking.

Rilievo di bloccaggio: riduce i rischi di danni.

Ugello di connessione universale: si collega facilmente e in modo sicuro a qualsiasi sacca di drenaggio da gamba o da letto.

Lattice: si adatta a tutte le dimensioni del pene.

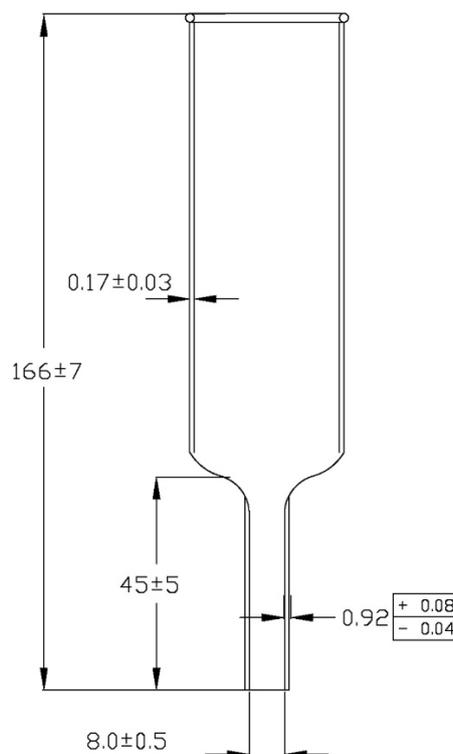

VALIDITÀ

5 anni.

AVVERTENZE

Si raccomanda di sostituire la guaina ogni 24 ore.

Effettuare una scrupolosa igiene locale prima dell'applicazione. Non stringere troppo la banda biadesiva per evitare problemi circolatori. Nei rari casi di possibile sensibilità ai prodotti in lattice consultare il proprio medico curante. Prodotto non sterile, non sterilizzabile.

CONFEZIONAMENTO

Sacchetto in plastica contenente 30 pezzi di guaine.

CONSERVAZIONE

Il dispositivo viene fornito con l'imballo standard della For.me.sa. che ne garantisce il corretto stoccaggio. Per mantenere la corretta conservazione nel tempo si consiglia di utilizzare sempre l'imballo originale congiuntamente ad un ambiente asciutto, al riparo da polveri e materiali nocivi e al di fuori della portata dei bambini.

SMALTIMENTO

Smaltire in caso di sostituzione o rotture rispettando le norme locali in materia di smaltimento rifiuti. Non sono presenti sostanze tossiche nel materiale di origine.

Fabbricante / Manufacturer	For.me.sa. Srl
Campo di applicazione/ Application advice	Adulti (Adults)  Dispositivo di Classe I
Conformità / Compliance	Dispositivo medico classe I non sterile, conforme al Regolamento 2017/745 No sterile medical device Class I, in compliance with Regulation 2017/745