

Linea letti degenza

Indice

Alzacoperte
Alzacuscini
Aste alzamalati
Cuscini
Fodere per cuscini
Fodere per materassi
Letti degenze
Lenzuolini
Materassi
Materassini di supporto
Parasponde
Protezioni da letto
Poltrone da letto
Riduttori di pressione
Reggi cuscino
Scaletta da letto
Sponde per letto
Supporti per sacche urina
Tappeti antitrauma
Tavolini servitore
Traverse
Tute da letto
Vassoi da letto

Letti degenze sollevamento manuale



cod. prodotto 31009

Letto degenza a tre snodi - 2 manovella larghezza 90 cm.

Struttura in tubolare di acciaio 50x20 mm, verniciato a polveri con fondo a rete di acciaio elettrosaldato, adatta ad alloggiare qualsiasi tipo di materasso.

Testata e pediera in acciaio verniciato a polveri di facile assemblaggio grazie agli attacchi a baionetta.

Pannelli molto robusti in MDF nobilitato da 11 mm facilmente smontabili per pulizia e sanificazione.

Alzatesta e alzagambe regolabili indipendentemente con azionamenti a vite e madrevite completamente in acciaio e manovelle ripiegabili a scomparsa.

Alzatesta ed alzagambe regolabili con azionamento a manovella.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM	 L	 P	 H		
<i>Letto</i>	206	92	106	135	40
<i>Rete</i>	200	90	50	-	-

ACCESSORIO



cod. prodotto 31015

Kit 4 ruote piroettanti con freno Ø 12.5 cm



cod. prodotto 31011

Letto degenza tre snodi - 2 manovelle larghezza 120 cm.

Struttura molto robusta in tubolare cilindrico di acciaio Ø 30 mm, verniciato a polveri con fondo a rete di acciaio elettrosaldato, adatta ad alloggiare qualsiasi tipo di materasso.

Testata e pediera in acciaio verniciato a polveri di facile assemblaggio grazie agli attacchi a baionetta. Pannelli molto robusti in MDF nobilitato da 11 mm facilmente smontabili per pulizia e sanificazione.

Alzatesta e alzagambe regolabili indipendentemente con azionamenti a vite e madrevite completamente in acciaio e manovelle ripiegabili a scomparsa.

Il letto è conforme alla norma UNI CEI EN 60601-2-52 dei letti medici.

2 manovelle - Alzatesta regolabile con azionamento a manovelle

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM	 L	 P	 H		
<i>Letto</i>	206	123	104	135	49
<i>Rete</i>	200	120	50	-	-

ACCESSORIO



cod. prodotto 31015

Kit 4 ruote piroettanti con freno Ø 12.5 cm

Letti degenze sollevamento elettrico



cod. prodotto 31010

Letto degenza tre snodi - elettrico larghezza 90 cm.

Struttura in tubolare di acciaio 50x20 mm, verniciato a polveri con fondo a rete di acciaio elettrosaldato, adatta ad alloggiare qualsiasi tipo di materasso.

Testata e pediera in acciaio verniciato a polveri di facile assemblaggio grazie agli attacchi a baionetta.

Pannelli molto robusti in MDF nobilitato da 11 mm facilmente smontabili per pulizia e sanificazione.

Alzatesta e alzagambe regolabili indipendentemente con azionamenti elettrici tramite attuatori comandati da un semplice telecomando azionabile dal paziente e dall'operatore. Il letto è conforme alla norma UNI CEI EN 60601-2-52 dei letti medici.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM	 L	 P	 H		
Letto	206	93	104	135	44
Rete	200	90	50	-	-

ACCESSORIO



cod. prodotto 31015

Kit 4 ruote piroettanti con freno Ø 12.5 cm



cod. prodotto 31012

Letto degenza tre snodi - elettrico larghezza 120 cm.

Struttura molto robusta in tubolare cilindrico di acciaio Ø 30 mm, verniciato a polveri con fondo a rete di acciaio elettrosaldato, adatta ad alloggiare qualsiasi tipo di materasso.

Testata e pediera in acciaio verniciato a polveri di facile assemblaggio grazie agli attacchi a baionetta. Pannelli molto robusti in MDF nobilitato da 11 mm facilmente smontabili per pulizia e sanificazione.

Alzatesta e alzagambe elettrici tramite attuatori comandati da un semplice telecomando azionabile dal paziente e dall'operatore. Il letto è conforme alla norma UNI CEI EN 60601-2-52 dei letti medici.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM	 L	 P	 H		
Letto	206	123	104	180	49
Rete	200	120	50	-	-

ACCESSORIO



cod. prodotto 31015

Kit 4 ruote piroettanti con freno Ø 12.5 cm

Letti degenze sollevamento elettrico



cod. prodotto 31018

Letto degenza a tre snodi su ruote - elettrico smontabile.

Struttura in tubolare di acciaio verniciato a polveri con piano in rete di acciaio elettrosaldato sul perimetro.

Testiera, pediera e sponde in legno.

Alzatesta (70°) e alzagambe (40°) regolabili in altezza tramite attuatori elettrici. Supporti per asta sollevamali ed asta da flebo.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM	L	P	H		
Letto	204	102	91	135	67
Rete	190	80	40	-	-

ACCESSORI



cod. prodotto 31021

Alza malati da letto in acciaio verniciato con maniglia in plastica. Portata max 75 Kg



cod. prodotto 31022

Asta per flebo in acciaio. Portata max 5 Kg



cod. prodotto 31023

Tavolino per letto degenza sagomato in ABS. Portata max 10 Kg



cod. prodotto 31019

Letto degenza a tre snodi su ruote - elettrico elevabile in altezza smontabile.

Struttura in tubolare di acciaio verniciato a polveri con piano in rete di acciaio elettrosaldato.

Montato su quattro ruote piroettanti da 125 mm tutte con freno.

Testiera, pediera e sponde in legno.

Alzatesta, alzagambe e altezza piano rete regolabili a mezzo di tre attuatori elettrici. Supporti per asta sollevamali e asta da flebo.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM	L	P	H		
Letto	205	102	81÷134	135	94
Rete	190	80	35÷85	-	-

ACCESSORI



cod. prodotto 31021

Alza malati da letto in acciaio verniciato con maniglia in plastica. Portata max 75 Kg



cod. prodotto 31022

Asta per flebo in acciaio. Portata max 5 Kg



cod. prodotto 31023

Tavolino per letto degenza sagomato in ABS. Portata max 10 Kg

Letti degenze sollevamento elettrico



cod. prodotto 31020

Letto degenza a tre snodi su ruote - elettrico elevabile con trendelenburg smontabile. Struttura in tubolare di acciaio verniciato a polveri con piano in rete in acciaio elettrosaldato. Montato su quattro ruote piroettanti da 125 mm tutte con freno. Testiera, pediera e sponde in legno.

Alzatesta e alzagambe regolabili a mezzo di due attuatori elettrici.

Altezza variabile da 38÷82cm a mezzo di due attuatori alloggiati nelle testate del letto e regolabili singolarmente o contemporaneamente, così da ottenere le seguenti funzioni: elevazione in piano (40÷80 cm) - trendelenburg (12°) - contro trendelenburg (12°). Supporti per asta sollevamalti e asta da flebo.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM	L	P	H		
Letto	216	102	90÷130	135	81
Rete	190	80	40	-	-

ACCESSORI



cod. prodotto 31021

Alza malati da letto in acciaio verniciato con maniglia in plastica. Portata max 75 Kg



cod. prodotto 31022

Asta per flebo in acciaio. Portata max 5 Kg



cod. prodotto 31023

Tavolino per letto degenza sagomato in ABS. Portata max 10 Kg

Scaletta da letto



cod. prodotto 31087


Scaletta letto molto semplice da usare, si fissa alla sponda o alla pediera del letto tramite un'asola.

Grazie alle maniglie in poliesteri si rivela un ottimo supporto per i pazienti che vogliono sedersi e/o muoversi dal letto alla carrozzina.

Dimensioni:

Lunghezza: 200 cm

Larghezza: 20 cm

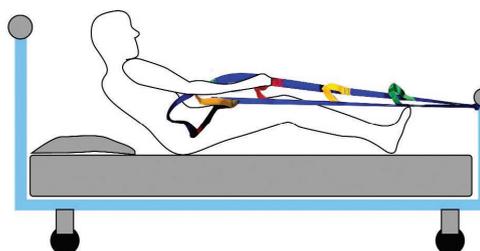

Tappeti antitrauma



cod. prodotto 31192

Tappeto antitrauma per proteggere e limitare i danni da caduta accidentale dal letto. Realizzato in polimero Rebuild. Resilienza elastica molto alta, sul quale è installato un sensore sensibile alla pressione.

Collegato al sistema di chiamata della casa, analogamente al sistema di chiamata infermieristico.

Appena il sensore viene azionato (mediante una pressione di 35 Kg c.a. sul materasso) viene inviato un segnale al sistema di chiamata.

Il pacchetto anti trauma si posiziona direttamente davanti al letto di cura del paziente, come uno scendiletto e informa il personale infermieristico appena la persona lascia il letto camminando sul tappeto o appena cade.

In questo modo l'aiuto può essere prestato in modo veloce e mirato.

Grazie all'interruttore on/off, il tappeto può essere disattivato (es.: durante una visita).

Il sistema di chiamata infermieristico nel letto resta in funzione.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM	 L Larghezza	 P	 H		
31192	70	180	4,5	7	da 35 a 250



cod. prodotto 31193

Tappeto antitrauma per proteggere e limitare i danni da caduta accidentale dal letto.

Realizzato in polimero espanso ad alta densità che attutisce l'impatto con il pavimento.

Il lato superiore è in tessuto poliuretano impermeabile, facilmente lavabile e sanificabile; quello inferiore in tessuto antistrappo ad alta resistenza e con inserti antiscivolo.

Il tappeto è in un unico pezzo, richiudibile per mezzo di cinghie e dotato di maniglia di trasporto.

Il peso di 10 kg rientra nei limiti della norma ISO 11228-1 e D.Lgs. 81/2008 per la movimentazione manuale dei carichi.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM	 L Larghezza	 P	 H	
31193	90	200	4	10



Materassi in PVC



cod. prodotto 31000

Materasso antidecubito in PVC dotato di 3 sezioni indipendenti ed una struttura esterna gonfiabile stabilizzante al fine di prevenire eccessivi "movimenti" dell'acqua. Il materasso ad acqua distribuisce la pressione complessiva su tutta la struttura di supporto, rendendola inferiore a quella arteriosa.

In questo modo l'epidermide non viene esposta a rischi di pressione eccessiva. Lavabile, di semplice utilizzo, si pone sopra il materasso normale.

Il prodotto è venduto insieme ad un compressore manuale, 2 disinfettanti e tubo per il gonfiaggio. Spessore PVC: 0,4 mm

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM	L	P	Kg
<i>dimensioni tot.</i>	190	85	4
<i>3 sezioni</i>	3x60	70	4

cod. prodotto 31093

Materasso antidecubito ad acqua in PVC composto da una vasca con bordo di irrigidimento ad aria e tre sezioni indipendenti ad acqua, sfrutta il principio di distribuzione del peso corporeo del paziente.

Ogni unità contiene un volume d'acqua di circa 17 litri.

Di facile utilizzo si posiziona sopra il normale materasso ed è lavabile con un normale detergente.

Spessore PVC 0,40 mm

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM	L	P	Kg
<i>dimensioni tot.</i>	180	70	3.5
<i>3 sezioni</i>	3x60	70	3.5

Materassi in poliuretano espanso 3 sezioni



cod. prodotto 31051

Materasso in poliuretano espanso composto a 3 sezioni e 2 strati, composto da una struttura portante, con densità 50 kg/m³ e strato d'appoggio in viscoelastico con densità 50 kg/m³ e sponde laterali di contenimento realizzate in poliuretano espanso densità 35 kg/m³ con una speciale angolatura che permette di trattenere la schiuma viscoelastica, senza uso di collanti.

Non foderato. A combustione ritardata.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM	L	P	H		Kg
31051	3x65 tot.195	85	14	120	5.7

serie 31XXX

Materasso antidecubito a 3 sezioni in poliuretano ventilato espanso lavorato a punta di piramide tronca.

DIMENSIONI

MISURE IN CM	L	P	H
31099	190	85	12
31100	190	85	12.5
31101	190	85	14
31102	200	90	10
31103	200	90	12.5
31104	200	90	14
31105	200	120	12.5
31106	200	120	14

Materassi in poliuretano espanso



serie 311XX

Materasso antidecubito a sezione unica in poliuretano espanso ventilato lavorato a punta di piramide tronca.

DIMENSIONI

MISURE IN CM	L	P	H
31107	190	85	10
31108	190	85	12.5
31109	190	85	14
31110	200	90	10
31111	200	90	12.5
31112	200	90	14
31113	200	120	12.5
31114	200	120	14



serie 3111X

Materasso antidecubito a sezione unica in poliuretano espanso a sezione unica con lavorazione ovoidale. Utilizzabile su entrambi i lati.

DIMENSIONI

MISURE IN CM	L	P	H
31115	190	85	14
31116	200	90	14
31117	200	120	14

Materassi in poliuretano espanso



cod. prodotto 31095

Materasso antidecubito in poliuretano espanso con bordi laterali.

Il materasso è diviso in 2 parti:

- struttura portante con bordi di irrigidimento realizzati in espanso ad alta resistenza (densità kg 40/m³) per supportare al meglio ogni spostamento del paziente;
- superficie interna a sua volta divisa in 3 sezioni rimovibili in poliuretano viscoelastico 80 kg/m³ (Classe di reazione al fuoco: Classe 1/M) che permette una perfetta adesione del materasso su letti articolati e facilita la sanificazione da parte degli operatori e la sostituzione di eventuali parti danneggiate riducendo il costo di manutenzione.

Il materasso è realizzato senza parti incollate. La struttura portante racchiude le tre sezioni che risultano appoggiate al suo interno.

DIMENSIONI

MISURE IN CM	L	P	H
31095	195	85	14

cod. prodotto 31123

Materasso con micro sistema ad aria, composto da struttura portante e sponde laterali di contenimento in D40RC, sistema Mistral per una miglior aerazione e schiuma poliuretanic D35 forata.

Sistema interno di ventilazione forzata mediante compressore.

Rivestimento in spalmato di PU

DIMENSIONI

MISURE IN CM	L	P	H
31123	195	85	14



Materassi in fibra cava siliconata



cod. prodotto **31068**

Materasso in fibra cava a 12 tubolari fissi con rivestimento in cotone 100%.

DIMENSIONI			
MISURE IN CM	 L	 P	 H
31068	195	85	18



cod. prodotto **31069**

Materasso in fibra cava siliconata a 13 tubolari intercambiabili con rivestimento e fodera in materiale ignifugo.

DIMENSIONI			
MISURE IN CM	 L	 P	 H
31069	195	85	18



cod. prodotto **31079**

Materasso in fibra cava siliconata con 13 tubolari asportabili con base in poliuretano espanso ignifugo e rivestimento in tessuto gommatino ignifugo 1IM, antistatico, antimuffa e antimicotico

DIMENSIONI			
MISURE IN CM	 L	 P	 H
31079	195	85	18



cod. prodotto **31084**

Materasso in fibra cava siliconata, antidecubito per lungodegenti.

DIMENSIONI			
MISURE IN CM	 L	 P	 H
31084	190	80	18



serie **3113X**

Materasso in fibra cava siliconata ad inserti asportabili e struttura portante in PU. D30 R.C. Fodera di rivestimento in fasciato di Trevira C.S.

DIMENSIONI			
MISURE IN CM	 L	 P	 H
31130	190	85	18
31131	200	90	18
31132	200	120	18



serie **3112X**

Materasso in fibra cava siliconata. Rivestimento in 100% cotone sanforizzato.

DIMENSIONI			
MISURE IN CM	 L	 P	 H
31127	190	85	10
31128	200	90	10
31129	200	120	10

Materassi viscoelastici



cod. prodotto 31070

Materasso in mousse viscoelastica a memoria di forma con supporto in espanso ad alta resilienza.

Il design combinato di mousse ed espanso scanalato rende il dispositivo particolarmente indicato in caso di lesioni vascolari, decorso postoperatorio ortopedico, emiplegia e paraplegia; dispositivo dotato di fodera integrale a cerniera in tessuto Pharmatex; densità del supporto in espanso 37 kg/m³; densità della mousse viscoelastica 80 kg/m³; classe 1 reazione al fuoco.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM	L	P	H	
31070	193	86	17	140



serie 3111X

Materasso bi-componente con base portante D40 e superficie d'appoggio in schiuma viscoelastica D50. Estremamente elastico con spessori minimi.

DIMENSIONI

MISURE IN CM	L	P	H
31118	190	85	14
31119	200	90	14



serie 3112X

Materasso composito a scarichi differenziati amovibili. Struttura portante in D40. Zona testa in D21.

Zona tronco-bacino in schiuma viscoelastica D50/5. Zona polpacci-talloni in schiuma viscoelastica D50/2.

DIMENSIONI

MISURE IN CM	L	P	H
31120	195	80	14
31121	200	90	14
31122	200	120	14

Materasso sfoderabile



cod. prodotto 31157

Materasso sfoderabile realizzato con un massello interno in Ecozell ignifugo a cellule aperte.

Resistente e confortevole, questo materasso è elastico ed indeformabile e grazie alla sua leggerezza risulta essere pratico e maneggevole. Omologato in classe 11M.

DIMENSIONI

MISURE IN CM	L	P	H
31157	190	85	12

Materassini di supporto



serie 3104X

Materassino in poliuretano espanso a cellula aperta, densità 21 Kg/m³ con fodera di rivestimento in nylon amovibile mediante zip su due lati.

DIMENSIONI			
MISURE IN CM	L	P	H
31046	190	80	4
31047	190	80	6



serie 3112X

Materassino in poliuretano espanso D21, supporto per sistemi ad aria. Rivestimento in Nylon.

DIMENSIONI			
MISURE IN CM	L	P	H
31124	190	80	4
31125	190	80	6
31126	190	80	8



cod. prodotto 31156

Materassino in poliuretano espanso, indeformabile a cellula aperta, ad alta resilienza, permeabile all'aria, antibatterico e antimicotico. Prodotto senza l'impiego di CFC (clorofluorocarburi). Conforme a quanto richiesto dalla normativa ATS.1000.001 AIRBUS. Prodotto ignifugo. Priva di lattice.

DIMENSIONI			
MISURE IN CM	L	P	H
31156	190	80	6

Fodere per materassi



cod. prodotto 31048

Fodera per materasso completamente amovibile e intercambiabile mediante cerniera perimetrale protetta costituita da foder superiore in Easytex spalmato di poliuretano su supporto di maglina in poliestere (traspirante, bielastico, antibatterico, antimicotico, trattamento Sanitized, Latex Free anallergico) e guscio inferiore in Greencover, spalmatura di PVC su tessuto di supporto in poliestere ad alta tenacità (impermeabile, antiscivolo, antiabrasivo).

Zip su 3 lati

DIMENSIONI			
MISURE IN CM	L	P	H
31048	196	82	15



cod. prodotto 31076

Fodera per materasso in gommattino ignifugo 1 IM con cerniera.

Ignifugo, anallergico, antiacaro, atossico, impermeabile, traspirante, antimicotico, latex free, elasticizzato (bielastico), antisudore, antiumidità, morbido, leggero, resistente e antibatterico.

DIMENSIONI			
MISURE IN CM	L	P	H
31076	195	90	18



cod. prodotto 31077

Fodera per materasso in gommattino ignifugo 1 IM a cuffia.

Ignifugo, anallergico, antiacaro, atossico, impermeabile, traspirante, antimicotico, latex free, elasticizzato (bielastico), antisudore, antiumidità, morbido, leggero, resistente e antibatterico.

DIMENSIONI			
MISURE IN CM	L	P	H
31077	195	85÷90	15

Fodere per materassi



cod. prodotto 31096

Fodera per materasso con cerniera realizzata in poliuretano microporoso traspirante bioelastico, impermeabile, antibatterico, sanificato e supportato da uno strato di maglia in Jersey.

Ignifugo di Classe 1/M, lavabile a 98° con detersivi a PH neutro e sterilizzabile in autoclave a 134°. Questo materiale morbido e liscio si adatta perfettamente alla sagoma del materasso, minimizza gli attriti e le forze di taglio responsabili nella maggior parte dei casi della formazione di lesioni. Questo particolare materiale fa traspirare la sudorazione del paziente evitando così la macerazione cutanea. Classe di reazione al fuoco: Ignifuga classe 1/M - Omologato dal Ministero degli Interni.

DIMENSIONI

MISURE IN CM	L	P
31096	200	90



cod. prodotto 31097

Fodera per materasso realizzata in poliuretano microporoso traspirante bioelastico, impermeabile, antibatterico, sanificato e supportato da uno strato di maglia in Jersey. Ignifugo di Classe 1/M, lavabile a 98° con detersivi a PH neutro e sterilizzabile in autoclave a 134°. Questo materiale morbido e liscio si adatta perfettamente alla sagoma del materasso, minimizza gli attriti e le forze di taglio responsabili nella maggior parte dei casi della formazione di lesioni. Questo particolare materiale fa traspirare la sudorazione del paziente evitando così la macerazione cutanea.

DIMENSIONI

MISURE IN CM	L	P
31097	200	92



serie 3113X

Fodera per materasso di rivestimento, amovibile mediante cerniera su 3 lati, superficie di contatto in tessuto Politex.

DIMENSIONI

MISURE IN CM	L	P	H
31135	191	87	15
31136	196	82	15
31137	200	90	15
31138	200	120	15

Lenzuolini in gomma



serie 311XX

Lenzuolino in gomma con anelli per casi di incontinenza.

DIMENSIONI

MISURE IN CM	L	H
31174	60	90
31175	90	70
31176	90	90
31177	90	110
31178	90	120
31179	90	150
31180	90	180
31181	90	200

Lenzuolini con anelli PU e cotone



serie 3118X

Lenzuolino proteggi materasso in poliuretano e cotone per casi di incontinenza, con quattro anelli di fissaggio che facilitano l'applicazione.

Un lato del lenzuolino è realizzato in tessuto di spugna che possiede piccoli cicli per assorbire grandi quantità di acqua. Il retro del lenzuolino è realizzato in poliuretano rivestito.

Dotato di quattro anelli che si trovano sulle sue estremità per facilitare il posizionamento sul materasso o dove il paziente si trova sdraiato.

Il tessuto in cotone si trova lungo tutto il perimetro del lenzuolino e viene ricucito sullo stesso.

DIMENSIONI

MISURE IN CM		
31182	50	70
31183	90	140
31184	130	140
31185	200	140
31186	230	140



serie 311XX

Lenzuolino proteggi materasso in poliuretano e cotone per casi di incontinenza, con quattro elastici di fissaggio che facilitano l'applicazione.

Un lato del lenzuolino è realizzato in tessuto di spugna che possiede piccoli cicli per assorbire grandi quantità di acqua. Il retro del lenzuolino è realizzato in poliuretano rivestito. Dotato di quattro elastici che si trovano sulle sue estremità per aggarrarsi e facilitare il posizionamento sul materasso o dove il paziente si trova sdraiato.

Il tessuto in cotone si trova lungo tutto il perimetro del lenzuolino e viene ricucito sullo stesso.

DIMENSIONI

MISURE IN CM		
31187	50	70
31188	90	140
31189	130	140
31190	200	140
31191	230	140

Traverse



serie 310XX

Traversa salvamaterasso in PVC e cotone.

DIMENSIONI

MISURE IN CM	 L	 H
31036	70	90
31037	70	140
31038	90	140
31039	130	140
31040	200	140
31041	230	140




cod. prodotto 3104X

Traversa in cotone felpato e poliuretano.

DIMENSIONI

MISURE IN CM	 L	 H
31042	70	140
31043	90	140
31044	130	140
31045	140	200

Cuscini

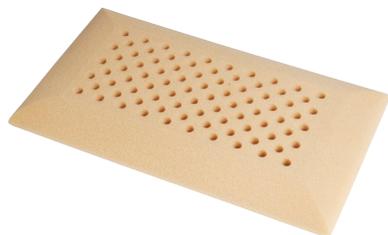

serie **3113X**

Cuscino forato antisoffocamento in poliuretano espanso D21.

DIMENSIONI			
MISURE IN CM	 L	 P	 H
31133	50	30	8
31134	70	40	9



cod. prodotto **31152**

Cuscino in poliuretano espanso densità 21 al kg/mc, ad alta resilienza, permeabile all'aria, ad elevata traspirabilità e indeformabile. Prodotto senza l'impiego di CFC (Clorofluorocarburi). Conforme a quanto richiesto dalla normativa ATS. 1000.001 Airbus.

Monoblocco sagomato a saponetta. Lavabile in lavatrice con miscele calde disinfettanti e detergenti. Sterilizzabile in autoclave a vapore a 135°. Prodotto ignifugo.

DIMENSIONI			
MISURE IN CM	 L	 P	
31152	80	40	



cod. prodotto **31154**

Cuscino in fibra di poliestere 100% ignifugo. Fodera di rivestimento in poliestere 100% ignifugo, irrestrictibile e lavabile in acqua a 40°. Armatura fili: 25 in ordito e 24 in trama al cm.

DIMENSIONI E PESO			
MISURE IN CM	 L	 P	 Kg
31154	80	50	0.7



cod. prodotto **31153**

Cuscino forato in poliuretano espanso densità 21 al kg/mc, ad alta resilienza, permeabile all'aria, ad elevata traspirabilità e indeformabile. Prodotto senza l'impiego di CFC (Clorofluorocarburi). Conforme a quanto richiesto dalla normativa ATS. 1000.001 Airbus. Monoblocco sagomato a saponetta Lavabile in lavatrice con miscele calde disinfettanti e detergenti. Sterilizzabile in autoclave a vapore a 135° Prodotto ignifugo.

DIMENSIONI			
MISURE IN CM	 L	 P	
31153	80	40	

Fodere per cuscini



cod. prodotto **31078**

Federa idrorepellente tessuto gommatino ignifugo 1 IM.

DIMENSIONI		
MISURE IN CM	 L	 H
31078	80	50



cod. prodotto **31085**

Federa in tessuto telato, traspirante, parzialmente antiallergico, impermeabile, antibatterico e ritardante di fiamma.

DIMENSIONI		
MISURE IN CM	 L	 H
31139	80	50



cod. prodotto **31139**

Federa per guanciale in Politec con zip.

DIMENSIONI		
MISURE IN CM	 L	 H
31085	80	50

Aste alzamalati da letto



cod. prodotto 31002

Asta alzamalati da letto struttura in acciaio verniciato con snodo regolabile in acciaio cromato.

Può essere completamente smontata per ridurre l'ingombro.

3 regolazioni in altezza.

Completa di triangolo e cinghia regolabile.



cod. prodotto 31013

Asta alzamalati da letto con base da pavimento.

Realizzato con tubo in acciaio cromato rinforzato Ø esterno 30 mm con base pieghevole e maniglia con cinghia regolabile.



cod. prodotto 31073

Asta alzamalati da letto con base a pavimento, adattabile alla maggior parte dei letti.

Braccio oscillante orientabile con blocchi in diverse posizioni.

Completamente smontabile per una riduzione degli ingombri.

Portata max 85 Kg.



cod. prodotto 31014

Solo triangolo con cinghia per asta alza malati

Sponde per letto



cod. prodotto **31016**

Sponda ribaltabile in alluminio.

La sponda ribaltabile è concepita per essere adattata a letti da degenza grazie alla sua semplice struttura da posizionare sulla testata e pediera.

DIMENSIONI			
MISURE IN CM	 L	 P	 H
31016	205	175	43



cod. prodotto **31017**

Sponda telescopica da agganciare alla testata e alla pediera del letto. Struttura in acciaio cromato, adattabile a tutti i letti.

DIMENSIONI			
MISURE IN CM	 L	 P	 H
31017	196	206	44



cod. prodotto **31024**

Sponda da letto anticaduta in alluminio verniciato.

Struttura con appoggio a terra, gambe regolabili in altezza.

Maniglia di appoggio in poliuretano morbido regolabile.

Borsa portaoggetti.

DIMENSIONI			
MISURE IN CM	 L	 P	 H
31024	45	64	81÷107 340+520 mm (gambe da piano rete) 470+520 (sponda da piano rete) mm



cod. prodotto **31025**

Sponde universali telescopiche.

Struttura in acciaio cromato.

Regolabili in larghezza e lunghezza, adattabili a tutti i letti a rete fissa senza regolazione (senza alzatesta e alzagambe).

DIMENSIONI			
MISURE IN CM	 L	 P	 H
31025	122÷183	100÷170	40

Parasponde



cod. prodotto 31029

Parasponda in poliuretano - fissaggio a cinghie.
Colore beige.


DIMENSIONI			
MISURE IN CM	 L	 P	 H
31029	130	30	33



cod. prodotto 31030

Parasponda in poliuretano pieghevole - fissaggio con velcro
Colore beige.

DIMENSIONI			
MISURE IN CM	 L	 P	 H
31030	127	25	66

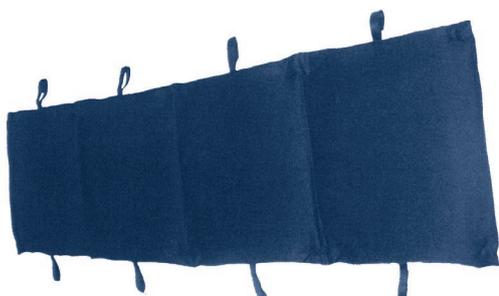

cod. prodotto 31080

Parasponda in cotone - fissaggio con anelli
Colore blu.

DIMENSIONI		
MISURE IN CM	 L	 H
31080	160	50



cod. prodotto 31081

Parasponda in poliuretano pieghevole - fissaggio con velcro
Colore beige.

DIMENSIONI			
MISURE IN CM	 L	 P	 H
31081	127	25	66

Parasponde



cod. prodotto **31082**

Parasponda in in gommatio ignifugo 1 IM, antimuffa, antistatico e antimicotico con cerniera sfoderabile - fissaggio con laccio/velcri .
Universale e adattabile a qualsiasi tipo di sponda.

DIMENSIONI			
MISURE IN CM	 L	 P	 H
31082	190	3	40



cod. prodotto **31086**

Parasponda ideale per tutelare i pazienti da urti accidentali contro superfici rigide. Per un corretto utilizzo fissare alle sponde del letto con le fasce munite di velcro. In materiale ritardante di fiamma ignifugo 1 IM.
Tessuto esterno foderato in tessuto poliestere spalmato 53% e poliuretano antibatterico e idrorepellente 47%.
Tessuto interno in poliuretano espanso reticolato a base poliestere.

DIMENSIONI		
MISURE IN CM	 L	 H
31086	200	50



serie **3114X**

Parasponda in poliuretano espanso con applicazione ad incastro. Rivestimento in Politex.

DIMENSIONI			
MISURE IN CM	 L	 P	 H
31140	90	3.5	35
31141	90	3.5	45
31142	190	3.5	35
31143	190	3.5	45



serie **3114X**

Parasponda per letto con applicazione ad incastro e zip di sicurezza per fissaggio alla sponda. Rivestimento in Politex.

DIMENSIONI			
MISURE IN CM	 L	 P	 H
31144	90	3.5	35
31145	90	3.5	45
31146	190	3.5	35
31147	190	3.5	45

Parasponde



cod. prodotto 31148

Parasonda ad aria realizzata in PVC elettrosaldato, con agganci in velcro. Completo di pompa di gonfiaggio manuale.

DIMENSIONI		
MISURE IN CM	 L	 H
31148	90	35



serie 311XX

Parasonda per letto con applicazione ad incastro, realizzato in poliuretano espanso con fodera amovibile in spalmato di PU e tessuto 3D nella zona testa per evitare il soffocamento dell'utilizzatore.

DIMENSIONI			
MISURE IN CM	 L	 P	 H
31149	190	3.5	35
31150	90	3.5	45

Protezioni da letto



cod. prodotto 31159

Protezione per sponde letto di forma triangolare, in espanso ad alta densità, protegge efficacemente dagli urti in caso di movimenti bruschi del paziente. Si fissa alle sbarre tramite due fibbie. Completa di fodera in poliuretano.

DIMENSIONI			
MISURE IN CM	 L	 P	 H
31159	90	20	25



cod. prodotto 31160

Protezione con interno in fibra cava di silicone, è resistente e compatta. Rappresenta una buona alternativa alle sponde.

Si fissa al telaio o alla rete del letto tramite semplici lacci e consente sia l'utilizzo di un sollevabusto sia una facile entrata/uscita dal letto.

Per una corretta stabilizzazione i due rulli sono uniti da una base in poliuretano rinforzato, impermeabile all'acqua. Rivestimento in poliuretano.

DIMENSIONI		
MISURE IN CM	 L	 H
31160	90	Ø20

Tute da letto



serie 310XX

Tuta per anziani o portatori di handicap a maniche corte e a protezione totale. Unisex, quindi utilizzabile sia da uomini che da donne. Unica cerniera dalle spalle al punto vita. In tessuto Terital 65% cotone 35%.

cod.prodotto 31088 S
 cod.prodotto 31089 M
 cod.prodotto 31090 L
 cod.prodotto 31091 XL
 cod.prodotto 31092 XXL

Tavolini servitori



cod. prodotto 31034

Tavolino servitore su ruote con regolazione manuale. Struttura in acciaio cromato 2 piani di cui 1 inclinabile. Superficie in laminato antigraffio con bordo di contenimento.

DIMENSIONI			
MISURE IN CM	L	P	H
<i>piano piccolo</i>	20	38.5	80 ÷ 117
<i>piano grande</i>	60.5	38.5	80 ÷ 117



cod. prodotto 31035

Tavolino servitore su ruote con molla per sollevamento automatico. Struttura in acciaio cromato con 1 piano inclinabile. Superficie in laminato antigraffio con bordo di contenimento. Altezza regolabile manualmente.

DIMENSIONI			
MISURE IN CM	L	P	H
31035	76.5	38.5	78 ÷ 110



cod. prodotto 31065

Tavolino servitore con piano in legno inclinabile e regolabile in altezza. Struttura metallica a 4 ruote 2 delle quali con sistema di bloccaggio.

DIMENSIONI E PESO				
MISURE IN CM	L	P	H	kg
31065	60	40	72 ÷ 115	7.1

Tavolini servitori



cod. prodotto **31066**

Tavolino servitore con 1 piano in legno regolabile in altezza con sistema a pistone. Struttura metallica a 4 ruote 2 delle quali con sistema di bloccaggio.

DIMENSIONI E PESO				
MISURE IN CM	 L	 P	 H	
31066	76	38	72 ÷ 115	10



cod. prodotto **31067**

Tavolino servitore con 1 piano in legno regolabile in altezza con sistema a pistone. Struttura metallica a 4 ruote 2 delle quali con sistema di bloccaggio.

DIMENSIONI E PESO				
MISURE IN CM	 L	 P	 H	
31067	76	38	72 ÷ 115	10



cod. prodotto **31072**

Tavolino servitore con 4 ruote regolabile in altezza ed inclinazione. Pieghevole e facilmente collocabile in poco spazio.

DIMENSIONI			
MISURE IN CM	 L	 P	 H
31072	60	40	61 ÷ 94



cod. prodotto **31161**

Tavolino servitore con struttura in acciaio laccato epossidico, tavolo in materiale plastico ad alta resistenza, regolabile in altezza ed in inclinazione.

DIMENSIONI			
MISURE IN CM	 L	 P	 H
31161	61	41	68 ÷ 100

Vassoi da letto



cod. prodotto 31033

Vassoio da letto con 1 piano antigraffio e bordo di contenimento. Reclinabile in 3 posizioni, con gambe pieghevoli

DIMENSIONI			
MISURE IN CM	L	P	H
31033	50	52	40



cod. prodotto 31064

Vassoio da letto con 1 piano antigraffio fisso. Gambe ripiegabili verniciate con polveri epossidiche.

DIMENSIONI			
MISURE IN CM	L	P	H
31064	50	52	40



cod. prodotto 31074

Vassoio da letto con 1 piano servi pranzo e gambe ripiegabili.

DIMENSIONI			
MISURE IN CM	L	P	H
31074	58	38	30

Reggi cuscino



cod. prodotto 31031

Reggicuscino con struttura in tubi di acciaio verniciato, regolabile in 6 posizioni. Rivestimento in nylon, poggiatesta imbottito.

DIMENSIONI		
MISURE IN CM	L	P
31031	63	55




cod. prodotto 31062

Reggicuscino con struttura in acciaio verniciato regolabile in 5 differenti posizioni. Rivestimento in nylon traspirante con poggiatesta imbottito;

DIMENSIONI E PESO				
MISURE IN CM	L	P	H	Kg
31062	50	57	30.5÷45	3


Alza coperte

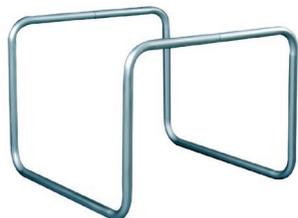

cod. prodotto **31032**

Alza coperte in tubo di alluminio anodizzato smontabile

DIMENSIONI			
MISURE IN CM	 L	 P	 H
31032	50	52	40

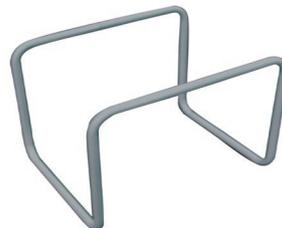

cod. prodotto **31063**

Alza coperte in tubo di alluminio dimensioni: 48,5 x 38 x 37,5 cm; peso: 500 g.

DIMENSIONI E PESO				
MISURE IN CM	 L	 P	 H	
31063	48.5	38	37.5	500 g

Poltrone da letto



cod. prodotto **31075**

Poltrona da letto espansa ignifuga tau30 rivestita in sky impermeabile, facilmente sfoderabile grazie ad una pratica chiusura a velcro.

Facilissimo da igienizzare con alcool o altri solventi diluiti.

DIMENSIONI			
MISURE IN CM	 L	 P	 H
31075	64	70	48



cod. prodotto **31083**

Poltrona da letto studiata per una corretta postura in pazienti anziani o disabili costretti a letto o per quei pazienti costretti a lunghe degenze. Aiuta la persona allettata a stare sollevata per facilitarne la respirazione.

Permette di rimanere a letto con il busto eretto, senza usare cuscini. La poltrona da letto è un poggiaschiena comodo per leggere, pratico per mangiare e per guardare la TV. E' un ottimo sostegno per l'allattamento. La poltrona da letto è pieghevole in modo da ridurre l'ingombro e riportarla comodamente ovunque, come se fosse un normale cuscino. La fodera è in puro cotone per evitare allergie o problemi causati da lunghe degenze. La zip dietro lo schienale consente di agevolare le operazioni di lavaggio, da effettuare con detergenti delicati.

DIMENSIONI		
MISURE IN CM	 L	 P
31083	40	40



cod. prodotto **31098**

Poltrona di posizionamento per l'appoggio della schiena. Supporto schienale per pazienti allettati. Realizzato in espanso di poliuretano ignifugo a struttura portante; sagomato in modo da sorreggere il paziente e contenerlo lateralmente; braccioli sul fianco per poter appoggiare un tavolino; possibilità di foderarlo con tessuti traspiranti impermeabili; possibilità di usarlo sia longitudinalmente al letto (senso normale) che trasversalmente appoggiandolo alle sponde di contenimento durante il pasto dei pazienti.

DIMENSIONI			
MISURE IN CM	 L	 P	 H
31098	64	80	46

Riduttori di pressione



cod. prodotto 31056

Riduttore di pressione con manometro, flussimetro e portagomma.

Con valvola di scarico sovrappressione. In conformità alla EN 738-1



cod. prodotto 31057

Gorgogliatore per riduttore - 200 cc connessione 1/4



cod. prodotto 31058

Portagomma per riduttore ossigeno - connessione 1/4

Supporti per sacche urine



cod. prodotto 31059

Supporto in metallo plastificato per il fissaggio della sacca urine al letto o alla sedia del paziente. Con attacco tondo per meglio adattarsi alla conformazione dei supporti di ancoraggio.



cod. prodotto 31060

Supporto in metallo plastificato per il fissaggio della sacca urine al letto o alla sedia del paziente. Con attacco angolato per meglio adattarsi alla conformazione dei supporti di ancoraggio.



cod. prodotto 31061

Supporto per il fissaggio della sacca urine al letto o alla sedia del paziente. Realizzato in polipropilene.

Per sacca urine usa e getta e borsa porta sacche urine vedere: linea monouso pagina 374